

C-View™ Software

Abriendo nuevos caminos en imágenes de mamas

C-View™
Software


La tecnología de tomosíntesis de seno Selenia® Dimensions® cambió el paradigma de la mamografía con mejoras significativas en las tasas de detección de cáncer de mama, reducciones en los retiros y mejor visualización de las estructuras mamarias sobre la mamografía digital sola.

Ahora Hologic ha empujado la tecnología de tomosíntesis aún más con la opción de software C-View, con dosis más bajas para la paciente.

El software C-View genera imágenes 2D a partir de los datos de tomosíntesis sin la necesidad de una exposición 2D, reduciendo así la dosis de radiación del paciente y el tiempo de compresión. Generando en imágenes 2D las cuáles tienen el mismo propósito que las imágenes FFDM 2D en un examen de tomosíntesis.

Las imágenes 2D creadas con el software C-View conservan detalles importantes de la tomosíntesis de Hologic. Una combinación de tomosíntesis Hologic y examen 2D con el software C-View (modo tomoHD) es superior al 2D para todos los tipos de senos, lo que mejora la precisión diagnóstica y reduce los retiros.

Con el software C-View, las instalaciones pueden ofrecer un mejor examen en una dosis equivalente a 2D

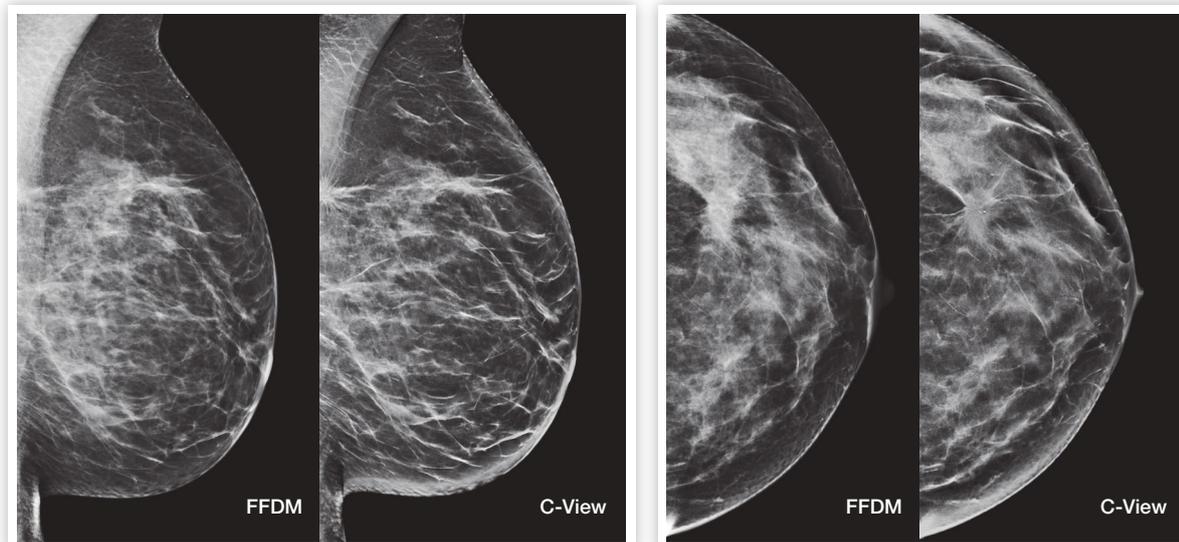

Examples of C-View 2D and conventional 2D images from the same study.

C-View™ Software

Abriendo nuevos caminos en imágenes de mamas



Especificaciones del producto

Opción del software Selenia® Dimensions® C-View

Estándar

- Licencia del Software C-View
- Potente procesador de gráficos

Salidas

Salida Imagen digital de mamografía DICOM (MG)
 Imagen de tomosíntesis mamaria (BTO)

Configuraciones Flexibles Salida a la estación de trabajo de diagnóstico Secure View DX y Pacs

Requisitos del Hardware

Se aplican los mínimos detalles de la estación de trabajo de la adquisición del Selenia Dimensions.

Póngase en contacto con su representante de Hologic para obtener más detalles.

Otros Requerimientos

Una (1) tomosíntesis de mama digital Selenia Dimensions sistema con 1.7 software o superior

Si usa la estación de trabajo SecurView DX, software 8.2 es recomendado.

El sistema de tomosíntesis Selenia Dimensions le ofrece flexibilidad en imágenes diferentes al alcance de su mano:

- Combo mode: Tomosynthesis + digital mammography
- ComboHD mode: Tomosynthesis + digital mammography + C-View
- TomoHD mode: Tomosynthesis + C-View



35 Crosby Drive • Bedford, MA 01730-1401

Tel: +1.781.999.7300 • Sales: +1.781.999.7453 • Fax: +1.781.280.0668 • womenshealth@hologic.com • www.hologic.com

DS-00262 Rev 004 (07/13) US/International. © Hologic Inc. 2013 All rights reserved. Specifications subject to change without notice. Hologic, C-View, Dimensions, SecurView, Selenia and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. This information is intended for medical professionals and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. Because Hologic materials are distributed through websites, eBroadcasts and tradeshows, it is not always possible to control where such materials appear. For specific information on what products are available for sale in a particular country, please contact your local Hologic representative or write to womenshealth@hologic.com.