


SONY

UP-X898MD

La impresora de video gráfica blanco y negro UP-X898MD de Sony está especialmente diseñada para ser utilizada con equipos de diagnóstico médico, tales como los sistemas de ultrasonido. La UP-X898MD incluye una interfaz USB para que el usuario pueda captar imágenes y almacenarlas en un dispositivo de almacenamiento USB portátil y pequeño. Ofrece impresiones de alta calidad fotográfica en apenas 1,9 segundos (aprox.). La impresora UP-X898MD es extremadamente pequeña y liviana. Para ofrecer una mayor conveniencia, la UP-X898MD incorpora un dial de control en el panel frontal que permite disfrutar de una operación más sencilla.

Impresora gráfica híbrida

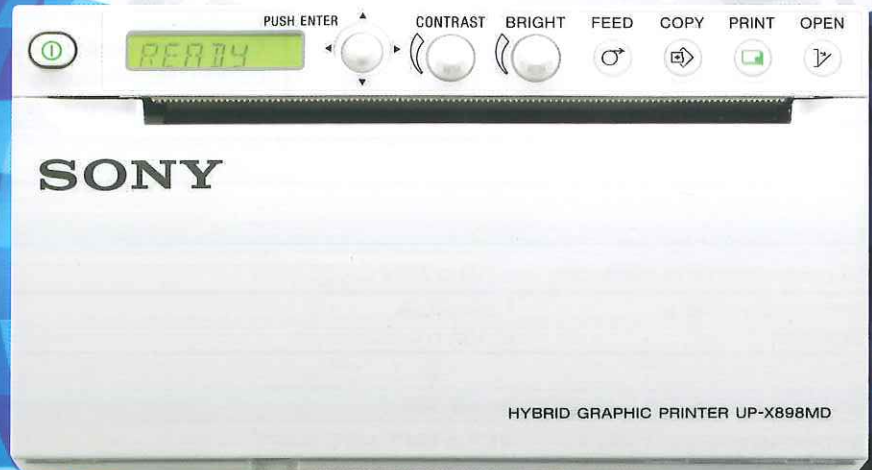

Características:

- Ideal para los actuales sistemas avanzados de ultrasonido
- Controles amigables en el panel frontal e incorporación de dial de control
- Híbrida - Admite señales de entrada analógicas y digitales
- Exclusiva captura digital incorporada que permite almacenar imágenes en un dispositivo USB conectado*
- Alta resolución de 325 ppp
- Diseño compacto que permite ahorrar espacio
- Impresión de alta velocidad de aproximadamente 1,9 segundos
- Utiliza los medios Serie 110 existentes de Sony: UPP-110S/5, UPP-110HD, UPP-110HG

* No se incluye dispositivo

Blanco
y negro

5,8
lb

325
PPP

256
pasos de
gradación

1,9
seg. por
impresión

Tamaño
compacto

Interfaz
USB 2.0

Especificaciones UP-X898MD

Medidas (An. x Al. x Prof.)	6 1/8 x 3 1/2 x 9 1/2 pulgadas (154mm x 88mm x 240mm)
Peso	5lb 8oz (2,6kg)

Información de impresión

	Conexión digital	Conexión analógica
Tecnología de impresión	Impresión térmica directa	
Resolución	325 ppp	
Gradación	8 bits (256 niveles)	
Tamaño de imagen	4096 x 1280 puntos	720 x 504 (NTSC), 720 x 604 (PAL)
Área de imagen	12 5/8 x 3 7/8 pulg. (Máx) 320 x 100mm	Modo SCAN: WIDE1 STD: 94 x 73mm (NTSC), 94 x 71mm (PAL) SIDE: 124 x 96mm (NTSC), 127 x 96mm (PAL)
Tiempo de impresión	1,9 segundos aproximadamente*	1,9 segundos aproximadamente*
Memoria	4096 x 1280 x 8 bits	10 cuadros (850 k x 8 bits por cuadro)
Controlador de impresora	Windows XP 32/64 bits Vista 32/64 bits Windows 7 32/64 bits Windows 8 32/64 bits	N/D

*Tamaño de impresión A7 al usar medios 110HG/110S

Interfaz

Interfaz	USB 2.0**	Conector de entrada: VIDEO IN (tipo BNC) Señales de video compuesto NTSC o PAL 1,0 Vp-p, 75 ohmios (detecta automáticamente NTSC/PAL)
Captura de imagen incorporada		Conector de salida: VIDEO OUT (tipo BNC) Directa (loop-through)
		Conector directo: mini conector estéreo

** Puerto USB (tipo A) para almacenar imágenes en una unidad de almacenamiento USB

Información de alimentación

Requerimientos de alimentación	de 100 a 240V CA, 50/60Hz
Corriente de entrada: (Standby)	1,3A a 0,6A (0,10A a 0,05A)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura	41°F a 104°F / 5°C a 40°C
Humedad	de 20% a 80% (sin condensación)

Almacenamiento y transporte

Temperatura	-4°F a +140°F / -20°C a +60°C
Humedad	de 20% a 80%

Estándares

Seguridad	UL 60950-1, 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 CSA C22.2 No.60950-1, No.601.1, No.60601-1
EMC	FCC Apartado 15, subapart. B, Dispositivos digitales Clase A

Accesorios

Provistos	Hoja limpiadora de cabezal término (1), CD-ROM (1) (Manual de instrucciones, Driver), "Antes de usar esta impresora" (1), Lista de contactos de servicio (1), Cable para unidad flash USB (1), Pack de medio inicial (HG) (1), cable de alimentación US (1).
Opcional	Pedal FS-24 / Botón remoto RM-91

UP-X898MD Panel trasero



Medios de impresión



UPP-110S/5

Medio estándar

UPP-110HD

Medio de alta densidad

UPP-110HG

Medio premium de alto brillo



www.sony.com/medical

©2014 Sony Electronics Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin que medie previa autorización por escrito. Todas las medidas y pesos no métricos son aproximados. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Sony es marca comercial de Sony. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

Precaución: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo solo a médicos u otros profesionales de la medicina debidamente matriculados, o por orden de ellos.

Precaución: Consulte las etiquetas del producto para ver indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso.

ME-X898MD